

DRX3

GENERADOR DE RAYOS X PORTABLE 5 KW CON BATERÍA RECARGABLE

See the future
SIUI

Eco-friendly & Seguro

El generador de Rayos X satisface las demandas clínicas empleando baja potencia, baja dosis y baja intensidad de radiación.





Sistema de Autodiagnóstico

El generador cuenta con un sistema de autodiagnóstico que se ejecuta al encender el generador y cuenta con códigos de falla e informe inteligente de errores.



Control de Exposición WiFi

Controla la exposición de manera inalámbrica con WiFi a través de la PC (Cuando se usa todo el Sistema de radiografía portátil con Flat Panel y estación de trabajo DRX1). Sin la exposición cableada, la operación está libre de la longitud del cable y el límite de espacio. El control de exposición inalámbrico en cualquier ángulo y distancia reduce efectivamente la radiación al operador.

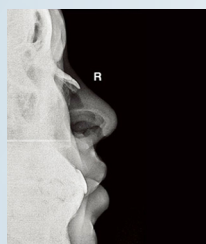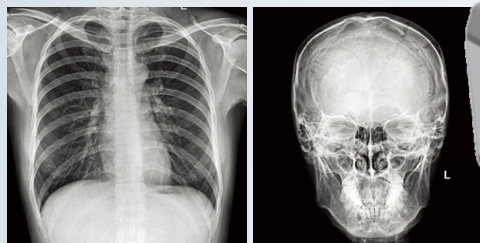

Batería Incluida

Control Remoto

Con estuche de Metal

Especificaciones Técnicas del Generador:

- Fuente de alimentación: Batería incorporada o con entrada de CA
- Potencia máxima de salida (kW): 5 kW
- Voltaje del tubo (kV): 40 ~ 125 kV, 1kV por paso
- Corriente del tubo (mA): 10 ~ 100 mA
- Tiempo de exposición (mAs): 0,4 - 200 mAs
- Frecuencia de trabajo: ≥ 50 kHz
- Punto de enfoque (mm): 0,6 mm / 1,8 mm
- Filtración total Colimador: de 3 mm incluido
- Colimador: Continuamente ajustable, con indicador cruzado para determinar la posición de recepción de la imagen.
- Tamaño (Largo x Ancho x Alto): 460mm x 245mm x 188mm , Peso (Kg): 12 KG
- Manija de soporte con movimiento de 360°

HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y
Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal
Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal
Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal
Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior
de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com
@byHergom 5224482452