

handy by + HERGOM

# ANDADERA PASO A PASO AN10A/AN10G

CLAVE	COLOR
AN10A	AZUL
AN10G	GRIS



Agarraderas con sistema de frenos de bloqueo automático



## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:



Estructura ligera, plegable, fabricado de aluminio.



Superficie de acero inoxidable.



Altura regulable



Capacidad de carga 100 kg máx.



4 Llantas de PVC



Asiento acojinado y canasta de compras



1. Agarraderas con sistema de frenos de bloqueo automático
2. Asiento acolchado
3. Asa con textura suave
4. Anillo de esponja (respaldo)
5. Ajuste de posición del brazo
6. Marco de aluminio
7. Canasta de compra
8. Reposapiés
9. Llanta de PVC

## USO DEL PRODUCTO


El usuario debe ajustar las ruedas y manubrio a su altura, a través de los pines de bloqueo y los tornillos de ajuste.

## LIMPIEZA

1. Se puede limpiar con un líquido doméstico antiséptico.
2. Se puede limpiar con productos de limpieza neutros, desinfectantes y no agresivos de uso doméstico.
3. Después del lavado, enjuague con agua limpia y limpie con un paño seco.

## PARA ALMACENAR

Levantar el anillo de esponja, levantar el cojín de asiento, y empujar hacia adentro.

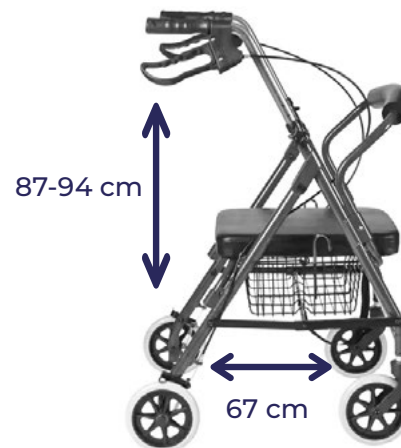

**Corporativo y Casa Matriz.**

Poniente 126-A  
#62 CDMX  
55 3093 9090

**Sucursal Guadalajara, Jal.**

33 3617 0335  
33 3617 0465  
Fax. 33 3616 6165

**Sucursal Monterrey, N.L.**

81 1365 2926  
81 1365 2927  
81 8346 8282  
Fax. 81 8311 4364

**Sucursal Puebla, Pue.**

222 403 2997  
222 211 4462  
Fax. 222 296 7570

**Lada sin Costo para el Interior de la República.**

800 067 0690  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

