



## BC-2800VET

Analizador automático de hematología



## BC-2800VET

Analizador automático de hematología




- **CBC (Complete Blood Count) + DIFF (Determinación cuantitativa de leucocitos)** para gato, perro, caballo, ratón, rata, conejo, vaca y mono; Medición adicional de Eos% para perros y gatos.
- 13 especies animales predefinidas + 3 especies animales programables
- Totalmente automatizado, compacto, lexible y de bajo costo Rendimiento:
- 25 muestras por hora
- Limpieza automática de la sonda de muestras
- Gran almacenamiento de datos: 1,000 resultados con histogramas

### Múltiples especies animales

- 13 programas predefinidos (perro, gato, caballo, ratón, rata, conejo, cerdo, vaca, búfalo, camello, oveja, mono y cabra) + 3 especies programables

### Procedimientos de operación

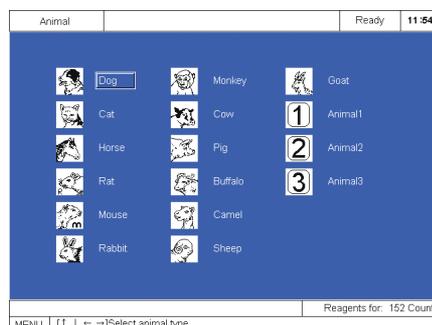


Paso 1 Nuestra lista integrada hace la selección de especies fácil.



Paso 2 Aspiración y procedimientos de dilución totalmente automáticos.

### Configuración superior

- El tamaño compacto requiere poco espacio en el banco
- La gran pantalla LCD a color ofrece una comunicación intuitiva
- La impresora térmica incorporada permite la impresión automática después de cada prueba

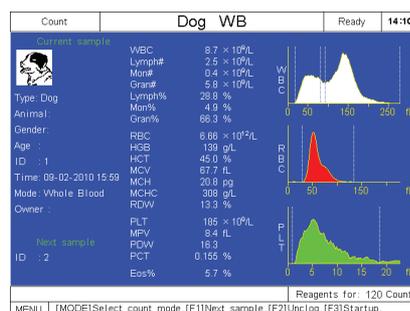

Paso 3 Resultados en menos de tres minutos; Todos los parámetros e histogramas son visualizados e impresos



Paso 4 Impresión multiformato programable

### Alta fiabilidad y precisión

- Alta precisión garantizada por el sistema de conteo independiente para cada especie.
- Programas completos de calibración y control integrados.

# BC-2800Vet

## Analizador automático de hematología

### Especificaciones técnicas:

#### Parámetros

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,  
RDW, PLT, MPV, PDW, PCT  
Parámetros adicionales para perro, gato  
Ratón, Rata, Conejo, Vaca y Mono  
Linfá#, Mon#, Gran#, Linfa%, Mon%, Gran%,  
Eos% (para perro y gato)  
Histogramas para WBC, RBC y PLT

#### Principios

Método de impedancia eléctrica para  
conteo y método libre de cianuro para  
Hemoglobina

#### Volumen de muestra

Prediluido: 20 \_L  
Sangre total: 13 \_L

#### Rendimiento

25 muestras por hora

#### Monitor

Pantalla LCD a color  
Resolución: 640 x 480

#### Arrastre

WBC, RBC, HGB \_ 0.5%, PLT \_ 1.0%

#### Entrada/Salida

RS232 x 2, 1 impresora paralela (opcional), 1  
escáner de código de barras (opcional),  
1 interfaz de teclado

#### Impresión

Grabador térmico, papel de 50 mm de  
ancho, multitud de formatos de impresión,  
impresora opcional

#### Entorno operativo

Temperatura: 15 °C ~ 30 °C  
Humedad: 30% ~ 85%

#### Requisito de alimentación

AC 100-240V, 50/60Hz

#### Dimensión

322 mm (ancho) x 437 mm (alto) x 386 mm  
(profundidad)

#### Peso

17,9 kg





**Corporativo y  
Casa Matriz.**

Poniente 126-A  
#62 CDMX  
55 3093 9090

**Sucursal  
Guadalajara, Jal.**

33 3617 0335  
33 3617 0465  
Fax. 33 3616 6165

**Sucursal  
Monterrey, N.L.**

81 1365 2926  
81 1365 2927  
81 8346 8282  
Fax. 81 8311 4364

**Sucursal  
Puebla, Pue.**

222 403 2997  
222 211 4462  
Fax. 222 296 7570

**Lada sin Costo para el  
Interior de la República.**

800 067 0690  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)



