

CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10LTS. OLV10

Nuestro concentrador de oxígeno adopta una fuente de alimentación de 110V 60Hz, utiliza aire como materia prima y Tamiz molecular de alta calidad como adsorbente, y adopta el principio de adsorción de oscilación de presión (PSA) para separar directamente el oxígeno del nitrógeno a temperatura normal, de este modo se produce oxígeno de alta pureza

La máquina puede ayudar al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, neumonía obstructiva crónica y la rehabilitación de pacientes anóxicos, etc.



Pantalla LCD



- Apagado
- Flujometro
- Nebulizador



Botella
Humificadora



Función Nebulizador



8,000 hrs. de uso 24/7




Capacidad de 10 LTS.



Rueda con Freno



Primer Filtro de Espuma

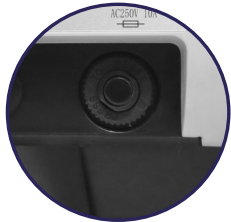

Protector de Sobrecarga



Cable



Características destacadas:

- El concentrador de oxígeno doméstico con capacidad de 10 L/min
- Rango de niveles de 2 a 10 LPM
- Gran pantalla LCD de las horas de trabajo totales y el tiempo de trabajo actual
- Funcionamiento continuo 24/7.
- Función de nebulizador
- Función de temporización
- Se puede usar con máquinas bipap
- Posibilidad de usarse para la inhalación de oxígeno de dos pacientes.
- Adopta el principio de adsorción de oscilación de presión (PSA)
- Pantalla con luces indicadoras de estado
- Ultra silencioso, $\leq 45\text{dB}$
- Alarma de falla de energía

Características Técnicas:

- Concentración de oxígeno $\geq 93\% \pm 3(V/V)$
- Fuente de alimentación: 110V 60Hz
- Presión de salida: 20Kpa-60Kpa
- Nivel de sonido: Menos de 45 dB
- Peso neto: 25KG
- Dimensiones: 500 X320 X 240(mm)
- Cantidad de Atomización: $> 0,15 \text{ ml/min}$



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A
#62 CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

