



CPAP AUTOMÁTICO III APNEA DEL SUEÑO RY680A / RY680B

Es un equipo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en adultos.

Cuenta con un sistema que combina los modos fijo y automático, capaz de detectar eventos respiratorios durante la noche y ajustar la terapia de manera precisa y confiable. Además, su funcionamiento silencioso lo convierte en una opción ideal para uso doméstico, garantizando comodidad durante el descanso.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modo de funcionamiento: CPAP, Auto CPAP

Rango de presión (cmH₂O): 4 a 20

Capacidad del humidificador: 300 ml

Nivel de ruido: 27 dBA ± 2 dBA

Peso neto: 1.5 kg

Dimensiones: 13.5 × 10.5 × 26.5cm



Características



Pantalla táctil de 3.5"

Control intuitivo mediante una pantalla amplia y de respuesta rápida



Diseño ultrasilencioso

Ventilador y sistema de conducción de aire optimizados para un funcionamiento silencioso




Prueba de ajuste de mascarilla

Permite verificar de forma rápida y sencilla el ajuste de la mascarilla antes de dormir



Funciones avanzadas

- **Monitoreo de múltiples eventos respiratorios:**
detección de RERA y otros eventos durante el sueño
- **Algoritmo inteligente:**
optimiza el tratamiento con base en los eventos respiratorios detectados
- **Configuración automática:**
ajuste automático de rampa de incremento de flujo automático, humidificación para evitar sequedad, tubo calefactado y compensador de fugas
- **Monitoreo continuo de la terapia:**
El equipo registra de forma continua los principales datos de la terapia, permitiendo consultar información relevante sobre el comportamiento respiratorio y el tratamiento. Su sistema de gestión de datos facilita el seguimiento de la terapia y la revisión de la información registrada

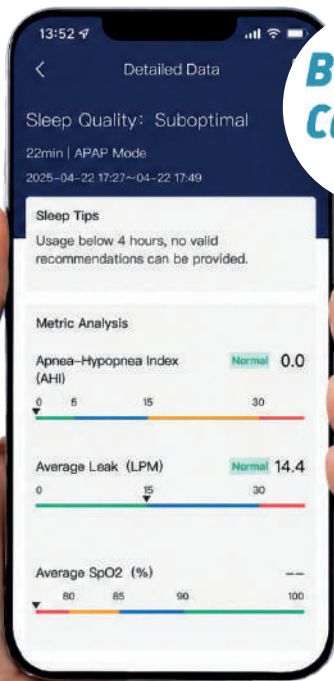

Plataforma web BreathCare

El sistema web Yuwell BreathCare permite gestionar de forma centralizada la información de pacientes con trastornos respiratorios del sueño. Desde una plataforma alojada en la nube, los profesionales pueden consultar y supervisar los datos de terapia de forma remota, facilitando el seguimiento de los pacientes sin necesidad de realizar la revisión directamente en el dispositivo. Además, ayuda a simplificar el flujo de trabajo y favorecer una colaboración más eficiente dentro de la red de atención.

Módulo de transmisión de datos:

Ambos modelos permiten registrar información de la terapia para su posterior gestión mediante el ecosistema BreathCare. El proceso de transferencia cambia según la versión:



• YH-680A

Los datos registrados durante la terapia se almacenan en una **tarjeta SD** y pueden transferirse posteriormente para su consulta y gestión.

CPAP → Tarjeta SD → Computadora → BreathCare → Gestión de datos

• YH-680B

Permite realizar la transferencia de datos de **forma inalámbrica**, facilitando el envío de la información para su gestión mediante el sistema compatible.

CPAP → WiFi → BreathCare → Gestión remota

El equipo incluye :



Depósito de agua



Adaptador de corriente



Tubo de aire



Mascarilla YN-02



Filtros de aire (x2)



Bolsa portátil



Integra funciones diseñadas para facilitar la configuración, el monitoreo y la gestión de la terapia, favoreciendo un tratamiento práctico y confortable

2 Años de garantía*

*El fabricante garantiza que su equipo estará libre de defectos de materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra, durante los períodos especificados a continuación:

Producto	Período de garantía
Depósito de agua:	90 días
Adaptador de corriente:	1 año
Equipo:	2 años

La garantía de calidad solo está disponible para el comprador original y no es transferible. La garantía quedará anulada si el equipo:

- * Es vendido o revendido fuera de la compra original.
- * Es reparado por una empresa o persona que no esté autorizada/acreditada.
- * Presenta contaminación o daños causados por fumar.

El fabricante se reserva el derecho de realizar la interpretación de las condiciones de garantía del equipo.

REPARACIÓN

1. Si su equipo presenta alguna falla, comuníquese con el fabricante o con su proveedor. Este equipo solo puede ser reparado por un proveedor autorizado.
2. El usuario debe seguir las instrucciones de limpieza y seguridad para garantizar que el equipo pueda utilizarse durante un período prolongado.
3. Si tiene dificultades para configurar, utilizar o realizar el mantenimiento del equipo , o si se presentan situaciones o eventos inesperados durante su funcionamiento, comuníquese también conel fabricante.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com
 @byHergom 5624482452