

Vetal3 Configuración del Producto

La configuración puede diferir en las distintas regiones, confirmela con su distribuidor local.

Componente	Especificaciones
Dimensiones	345 mm x160 mm x 255 mm, ≤4 kg
Pantalla	10.1", LED HD, resolución de 1024*600
ECG	Incluido un cable de 3 derivaciones con pinzas de cocodrilo
SpO ₂	Incluida una sonda de SpO ₂ con adaptador de sensor
PNI	Incluido un conjunto de manguitos (cinco piezas)
FC/FP	Incluido
FR	Incluido
Temp	Incluida una sonda rectal



Cables de ECG con pinzas de cocodrilo



Sonda de SpO₂



Sonda de temperatura rectal



Manguito de NIBP de varios tamaños

Monitor Veterinario Portátil

Protección garantizada y elegancia natural



Pet Guardian

El monitor veterinario **Vetal 3** posee un diseño accesible, con una configuración sencilla y un uso intuitivo. Los parámetros básicos de ECG, SpO₂, NIBP, TEMP y RESP están integrados para satisfacer la mayoría de los requisitos clínicos, y proporcionar una atención eficiente y de calidad.



Precisión y confiabilidad

El primer paso para la seguridad

- Con algoritmos de parámetros optimizados y accesorios especiales para la práctica veterinaria diaria, Vetal 3 satisface las necesidades clínicas con mediciones precisas y estables.



- El diseño ecológico sin ventilador reduce las posibilidades de que ingresen pelos de los animales en el interior del monitor, prolongando la vida útil del dispositivo y es eficaz en diferentes entornos.

Diseño elegante


Ofrece una experiencia de usuario más cómoda

- La pantalla LED de alta resolución de 10.1 pulgadas ofrece una visualización de alta calidad.
- El indicador de la alarma de presión en las vías respiratorias exclusivo ofrece una experiencia realista.



Uso intuitivo

Respuesta rápida a los casos clínicos

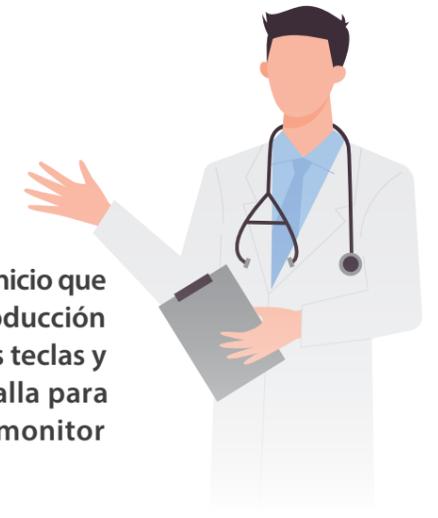

Función **de guía de inicio** que ofrece una breve introducción de las funciones de las teclas y la interfaz de la pantalla para ayudar a dominar el monitor desde el primer uso.

Se establece el mejor intervalo de las alarmas de forma **automática** después de seleccionar el tipo de paciente e ingresar el peso corporal.



El diseño sencillo de los flujos de trabajo y el acceso a todas las funciones en dos pasos o menos.



El usuario puede definir teclas rápidas para acceder directamente a las funciones de uso más frecuente.



Se puede acceder al menú principal, en el que se enumeran todas las funciones, con un solo clic.



¡Se puede acceder a todos los ajustes en dos pasos!



- La pantalla antirreflejo facilita la lectura. El veterinario puede proporcionar un tratamiento o ajustar los medicamentos lo antes posible para aumentar la seguridad.

Vetal 3

Monitor Veterinario Portátil



Especificaciones Físicas

Tamaño (anch. x alt. x prof.):	Tamaño (300mmX215mmX155mm):
Peso:	Aprox. 2.1 kg (con batería)
Ventilador:	Si
Resistente al agua:	IPX1

Display

Tipo:	Pantalla en color de 10.1 inches
Resolución:	1024 x 600 pixeles

ECG

2 - Latiguillos	I, II, III
Velocidad de barrido:	I, II 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Gane:	×0.125 ×0.25, ×0.5 ×1 ×2 ×4 Auto
Ancho de banda:	Modo diagnóstico: 0.05Hz ~ 150 Hz Modo de monitor: 0.5Hz ~ 40 Hz Modo quirúrgico: 1Hz ~ 20 Hz

HR

Rango:	15bpm~350bpm
Precisión:	±1bpm ó r ±1%

Respiración

Método:	Método de impedancia
Dirección:	I y II
Rango:	0 rpm ~ 150 rpm
Precisión:	± 2 rpm or ± 2% (7rpm ~150rpm)
Velocidad de barrido:	3 mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25.0 mm/s, 50.0 mm/s

SpO₂

Rango:	0% ~ 100%
Precisión:	±3% (70% ~ 100%)
Índice de perfusión (PI)	Si
Rango de PI	0.05% ~ 20%

PR

Rango:	20 bpm ~ 254 bpm (SpO ₂) 30bpm ~ 300bpm (NIBP)
Precisión:	±3bpm (SpO ₂) ±3bpm ó ± 3% (NIBP)

NIBP

Modo de operación:	Manual, Auto, STAT
Medidas:	Sistólica, diastólica, media
Rango	Peso >23kg: 10 ~ 290mmHg Peso 10 ~ 23kg: 10 ~ 240mmHg Peso < 23kg: 10 ~ 240mmHg
Max. tiempo de medición:	120s
Protección contra sobrepresión:	Si

TMEP

Canal:	Individual
Rango:	0°C ~ 50°C
Precisión:	±0.1°C

Almacenamiento de datos

Tendencias:	1200 horas, @1h 120 horas, @1min 4 horas, @5s
Parámetros de alarma:	1800 alarmas y formas de onda de los parámetros relacionados
Eventos de Arrh:	128 ventos de arritmia y formas de onda relacionadas y parámetros

Mediciones de NIBP:	1600 sets
---------------------	-----------

Batería

Tipo:	iones de litio recargables
Número:	1
Voltaje:	7.2V
Capacidad:	2600 mAh
Tiempo de ejecución:	≥ 2h
Tiempo de carga:	Menos de 4 horas (monitor apagado) Menos que 6 horas (monitor encendido)

Interfaz

Conectores:	1 Conector de alimentación de CA 1 Conector de red RJ45 1 Conector USB 2.0
-------------	--

Medio Ambiente

Temperatura Ambiente:	En funcionamiento: 0 ~ 40°C Almacenamiento y transporte: -20 ~ 60°C
Humedad relativa:	En funcionamiento: 15% ~ 95% Almacenamiento y transporte: 10% ~ 95%



Vetal 3 Portable veterinary monitor
Accurate Intuitive Stylish



Statement by the Jury

Portable and equipped with animal-specific functions, the Vetal 3 allows for the accurate and stable monitoring of animal vital signs.



Matriz CDMX
01 (55) 30939090
www.hergom-medical.com

