

DP10VB

Sistema veterinario de ultrasonido portátil DP-10



DP10VB

Sistema Portátil de Ultrasonido Veterinario



Diseño ergonómico moderno, sistema ligero que facilita el transporte.



Monitor LEO 12.1 con función de inclinación de 30°



Teclado de silicio que proporciona un estilo nuevo de retro-iluminación.



Compensación de ganancia en función del tiempo (fGC) de 8 segmentos que garantiza un control de imagen preciso.



2 Puertos USB.



Batería opcional (1.5hrs uso continuo).



1 Puerto activo para transductor



Arma tu kit con transductores
(Los transductores se venden por separado)



6LE5VP
TRANSDUCTOR
LINEAL



35C20EA
TRANSDUCTOR
CONVEXO



65C15EAV
TRANSDUCTOR
MICROCONVEXO

DP-10VET

Sistema digital de adquisición de imágenes de diagnóstico por ecografía.

Excelente calidad de imagen y gran variedad de aplicaciones veterinarias

- Tecnología totalmente digital
- Función IP (procesamiento de imágenes) para una optimización rápida de la imagen
- Una gran variedad de transductores para aplicaciones abdominales, torácicas, cardíacas, tendinosas, oftalmológicas y para regiones pequeñas y exploraciones del sistema reproductor de animales tales como perros, gatos, equinos, bovinos, ovinos, etc.

Ahorro del tiempo de exploración al facilitar el flujo de trabajo

- Arranque rápido en 20 s
- Teclas definidas por el usuario para operaciones personalizadas
- Las imágenes o cines se guardan en el disco local o USB con sólo pulsar una tecla

Configuración estándar:

- Panel de control
- Asa de transporte
- Indicadores: encendido/batería/en espera/estado HDD
- Interfaces de entrada y salida



Puerto de salida
(VGA, super video, BNC).



Paquete de Software de
medición y cálculo.




Apto para todas las
especies




DP10VB


Modos de imagen disponibles

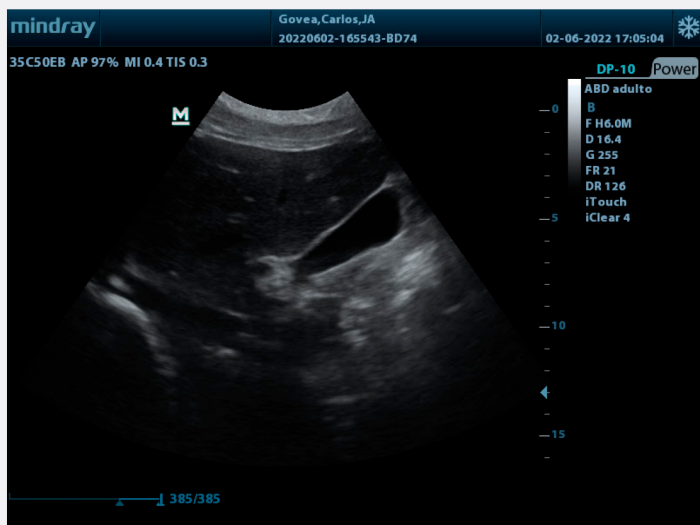


Modo B blanco y negro
Incluido

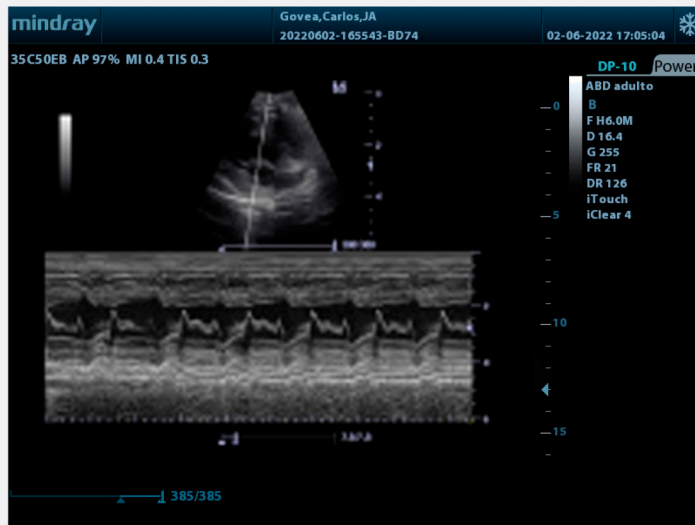

Modo M movimiento
Incluido

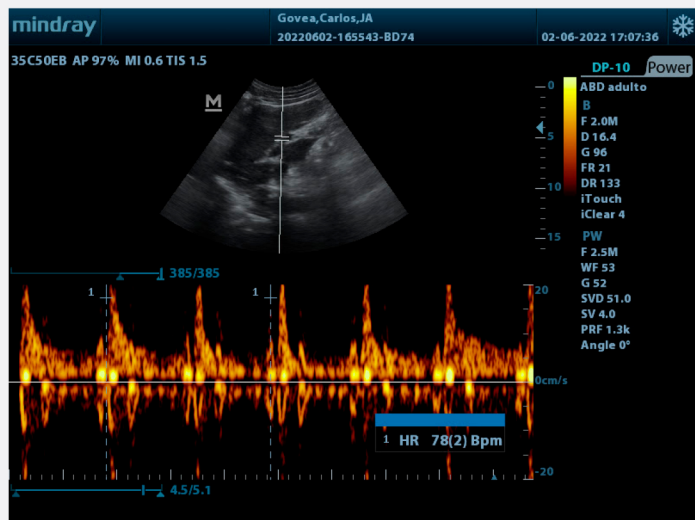

Modo PW Doppler Pulsado
Opcional

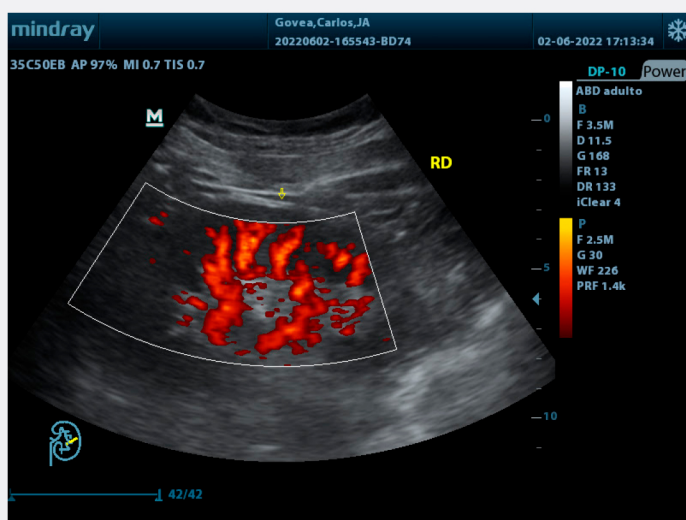

Modo P Power
Opcional

Transductores para DP10VB Vet

Transductor	Ilustración	Tipo de matriz	Parámetros	Aplicación	Kit de biopsia
35C50EA		Convexo	- Ancho de banda: 1.8 - 6 MHz - FOV (máx): 82° - Radio: 50 mm	Abdomen de animal grande	NGB-001, multiángulo, reusable
35C20EA		Convexo	- Ancho de banda: 1.7 - 6 MHz - FOV (máx): 110° - Radio: 20 mm	Abdomen de animal pequeño	NGB-003, multiángulo, reusable
65C15EAV		Convexo	- Ancho de banda: 3 - 11.2 MHz - FOV (máx): 108° - Radio: 15 mm	Abdomen de animal pequeño, torácico y cardíaco	NGB-005, multiángulo, reusable
75L38EA		Lineal	- Ancho de banda: 3.4-12.9 MHz - FOV (máx): 37.9 mm	Abdomen de animal grande, tendón y partes pequeñas	NGB-002, multiángulo, reusable
75L53EA (Reemplazado por 75L38EA)		Lineal	- Ancho de banda: 3 - 12.6 MHz - FOV (máx): 50.6 mm	Abdomen de animal pequeño, tendón y partes pequeñas	NGB-007, multiángulo, reusable
10L24EA		Lineal	- Ancho de banda: 3.7-16.2 MHz - FOV (máx): 23.6 mm	Abdomen de animal pequeño, tendón y partes pequeñas	NGB-016, multiángulo, reusable

Transductor	Ilustración	Tipo de matriz	Parámetros	Aplicación	Kit de biopsia
50L60EAV		Lineal endo rectal	- Ancho de banda: 2.2-8.5 MHz - FOV (máx): 58.8mm	Sistema reproductor y tendón de animal grande	no disponible
75L50EAV		Lineal endo rectal	- Ancho de banda: 3 - 12 MHz - FOV (máx): 47.5mm	Sistema reproductor y tendón de animal grande	no disponible
65EC10ED		Endocavitario	- Ancho de banda: 3 - 11 MHz - FOV (máx): 138° - Radio: 10 mm	Sistema reproductor de animal grande	NGB-004, un solo ángulo, reusable