

DRX2

GENERADOR DE RAYOS X PORTÁTIL con Tecnología Patentada **DOUBLE CLOSED LOOP CONTROL** y tecnología **LOW RADIATION CONTROL**. Generador de alto voltaje, Tubo de Rayos X, Beam Defining Clipper y Panel de Control. Alta calidad de imagen y portable.

Eco-friendly & Seguro

El generador de Rayos X satisface las demandas clínicas empleando baja potencia, baja dosis y baja intensidad de radiación.

Sistema de Autodiagnóstico

El generador cuenta con un sistema de auto diagnóstico que se ejecuta al encender el generador y cuenta con códigos de falla e informe inteligente de errores.



100 cm

Luz de Láser Doble

Facilita apuntar la distancia de 1 metro rápidamente, mejorando así la eficiencia del examen.


Control de Exposición WiFi

Controla la exposición de manera inalámbrica con WiFi a través de la PC (Cuando se usa el Sistema DRX1).

Sin la exposición cableada, la operación está libre de la longitud del cable y el límite de espacio. El control de exposición inalámbrico en cualquier ángulo y distancia reduce efectivamente la radiación al operador.



Con estuche de Metal

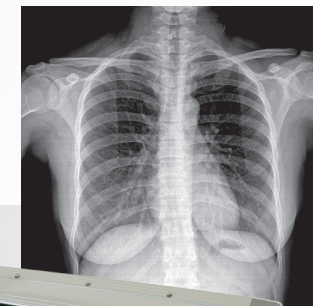

Características Generales

Tecnología avanzada de suministro de energía. El sistema de control Double closed-loop que regula la corriente del tubo logra una precisión dentro del 3%, superando la mayoría de los instrumentos de rayos X en el mercado.

Especificaciones Técnicas del Generador:

- Fuente de alimentación: batería incorporada o entrada de CA
- Potencia máxima de salida: 2kW
- Voltaje del tubo: 40 kV- 100 kV
- Corriente del tubo: 25 mA (40 kV - 60 kV); 20 mA (61 kV - 100 kV)
- Frecuencia de trabajo: _50kHz
- Punto de enfoque: 1.2mm
- Filtración total: 3mmA colimador incluido
- Colimador: Continuo con centro + indicador
- Dimensiones: 522 mm (largo) x 227 mm (ancho) x 271 mm (alto)
- Peso: 12 kg
- Transmisión inalámbrica a la estación de trabajo.
- Manija de soporte con movimiento de 360°



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com
@byHergom 5224482452