

handy

by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

Recovery

COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNA

MOD. CC01

El colchón de presión alterna CC01 está compuesto por burbujas de aire particularmente cómodas, ajustándose al cuerpo del paciente gracias al sistema de inflado alterno.

Mantiene un alto rango de comodidad y contrarresta la aparición de llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas.

El colchón CC01 está diseñado para el tratamiento y prevención de lesiones, disminuye la sudoración.


Favorece la curación de las heridas y brinda máxima comodidad al paciente.

Funcionamiento:

Las burbujas de aire cuentan con un sistema de inflado alterado con un ciclo de 6 minutos.

Mientras las burbujas representadas en color azul se mantienen infladas, la otra mitad de las burbujas representadas en color verde permanecen desinfladas.

Posteriormente el proceso se invierte, inflándose las burbujas representadas en color verde, alterándose el ciclo cada 6 minutos.

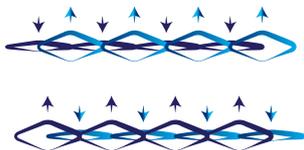

Especificaciones:

Dimensiones:

Colchón (Lx Ax H) - 195cm x 88cm x 75cm

Extensiones (Lx A) - 50cm x 88cm

Compresor (Lx A x H) - 26cm x 13cm x 10cm

Peso: Colchón - 2.3 log - Compresor - 1.4 kg

Potencia: AC110V/220V 50Hz/60Hz

Rango de presión: 50 a 105 mmHg

Caudal de aire: 4-6 litros / min

Material del colchón: EN-71 PVC de grado médico

Grosor del colchón: 0,35 mm

Resistencia al frío: 30 Grados



HERGOM

EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452