

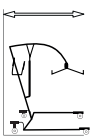
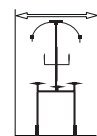
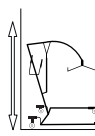
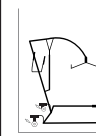
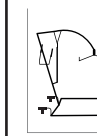

Grúa eléctrica para paciente HGY101



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 1220x630x1300 mm (LargoxAnchoxAltura)
Rango máximo de la horquilla 870 mm
Rango de elevación 900±10 mm (más bajo), 1740±10 mm (más alto)
Capacidad máxima de carga: 185 kg
Velocidad máxima sin carga: 8,1 mm/s
Velocidad máxima a plena carga: 5,2 mm/s
Potencia de entrada: 24V CC
Motor: 24V/8000N
Peso Neto: 43kg
Ruido ≤50dB

Tabla de parámetros de medidas y peso de la grúa eléctrica para paciente.

Largo total (mm)	Ancho total (mm)	Rango de elevación (mm)	Llanta trasera (inch)	Llanta delantera (inch)	Capacidad máxima de carga (kg)
					
1220	630 a 870	900±10 a 1740±10	4 con freno	3	185

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

- Acero moldeado de alta resistencia con marco reforzado, tratamiento de pintura en polvo, duradero y resistente a la corrosión.
- Horquilla ajustable entre 630 a 870 compatible con el ancho con todo tipo de sillas de ruedas, sillas, cómodas y camas de pacientes también.
- Movimiento suave hacia ambos lados en giros de 360 ° durante la transferencia del paciente.
- Peso ligero, fácil de desmontar y conveniente para el transporte y el montaje. Adecuado para la transferencia diaria de todo tipo de pacientes.

Figura 1 (Diagrama estructural)



* Tome en cuenta que modificamos a discreción la tecnología y apariencia del producto a favor de su mejora y la seguridad del usuario.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452