


Especificaciones Técnicas

	HyLED 580 Vet series
Iluminancia central (a 1 m de distancia)	160.000 lux
Diámetro de campo de luz (a 1 m de distancia)	220 mm
Profundidad de iluminación (20%)	1200 mm
Temperatura de color	4350 K
Índice de reproducción cromática (Ra)	96
Índice de reproducción cromática (R9)	96
Vida útil de la bombilla	≥60,000h
Número de bombillas LED	18

HyLED 580 Vet

Luces quirúrgicas LED

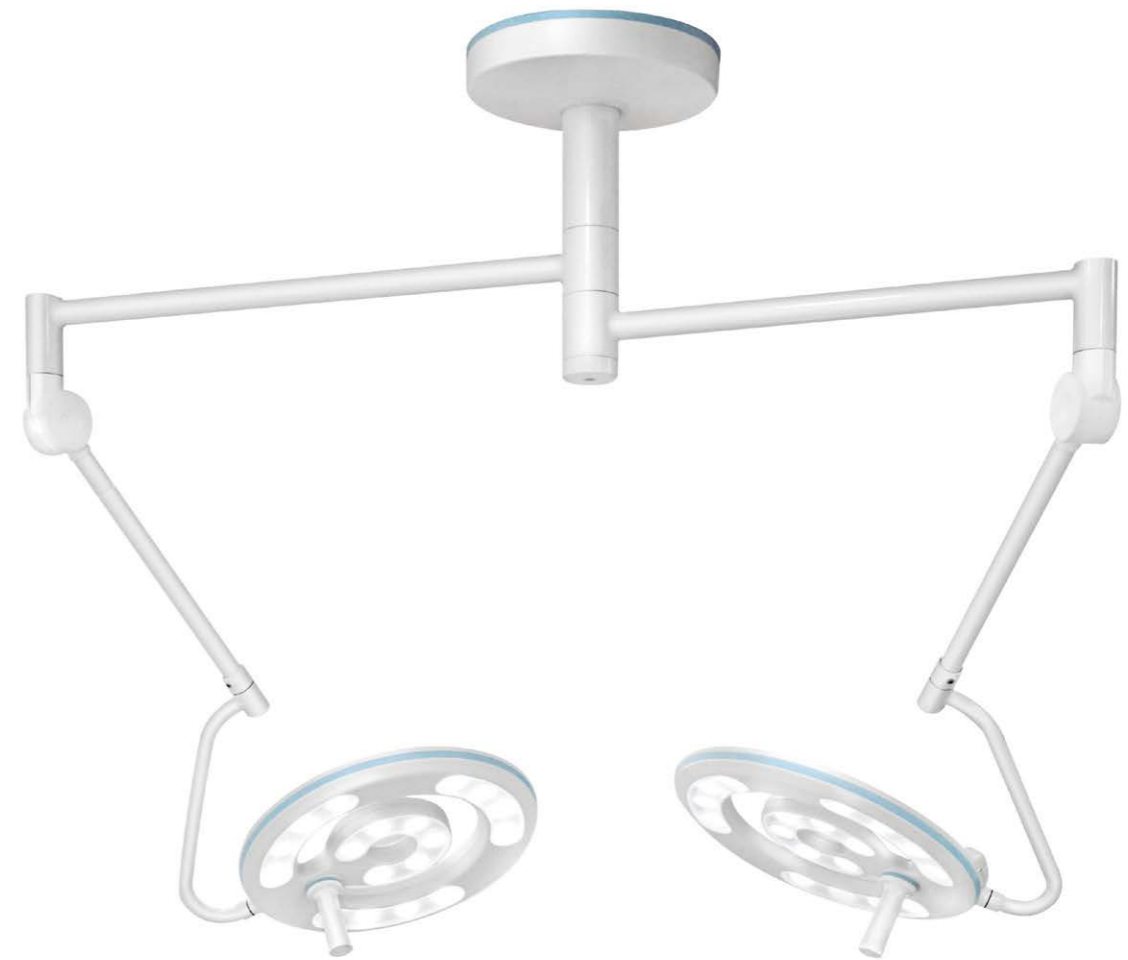

HyLED 580 Vet

La serie HyLED 580 Vet hereda la avanzada tecnología de luz quirúrgica LED de Mindray y proporciona una iluminación excelente. Eso cumple con los requisitos de diferentes cirugías con animales, como cirugía radical, cirugía paliativa, cirugía de emergencia, cirugía no urgente, cirugía aséptica y cirugía de infección.

- **Excelente iluminación** (la luz suave reduce el estrés del animal).

Iluminancia flexible: La iluminancia es ajustable en 10 niveles, con un máximo de 160.000 lux (1m).

Alta fidelidad: A una temperatura de color de 4350K, tanto Ra como R9 pueden alcanzar 96 CRI.



Diseño de control de infecciones (El diseño antibacteriano previene la infección secundaria).

Efectiva aplicación antibacteriana: el estándar internacional antibacteriano el polvo aplicado en la superficie inhibe el crecimiento de estafilococos áureo.

Tipo de bacteria	Concentración de inoculados Cepas (por/ml)	Cantidad de Inoculados Cepas (ml)	Logaritmo medio de las cepas (por/cm2) después de diferentes tiempos de contacto			Valor de antibacterial actividad
			/	"0 Horas"	"24 horas"	
Escherichia coli ATCC 8739	1.1X10 ⁶	0.2	Muestra	/	0.21	5.5
			Control	4.18	5.69	
Estafilococo áureo ATCC 6538P	1.1X10 ⁶	0.2	Muestra	/	-0.20	5.8
			Control	4.11	5.56	

Control de infecciones: El mango reesterilizable opcional previene la infección durante la cirugía.

- **Excelente iluminación** (la fuente de luz LED especializada garantiza un uso a largo plazo).

Proveedor de luz superior: bombillas LED Osram de Alemania


Larga vida útil: vida útil de la bombilla LED de hasta 60,000 horas (equivalente a 6 años de iluminación continua)



Luces montadas en el techo
HyLED 580 Vet



Luces montadas en el techo
HyLED 580/580 Vet

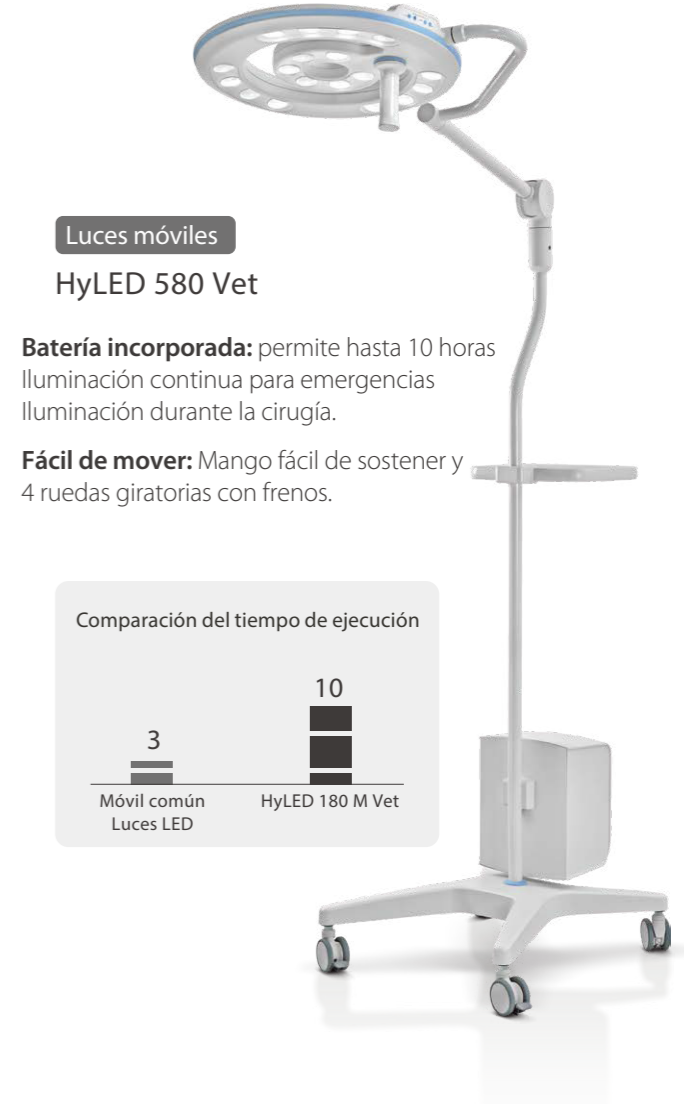

Luces móviles
HyLED 580 Vet

Batería incorporada: permite hasta 10 horas iluminación continua para emergencias iluminación durante la cirugía.

Fácil de mover: Mango fácil de sostener y 4 ruedas giratorias con frenos.

