


# XIGNAL

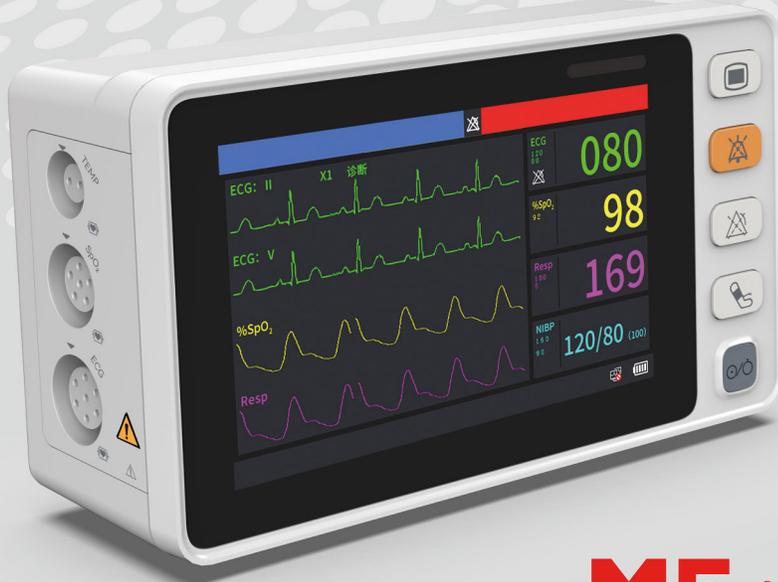

## M5 Monitor de paciente

### CARACTERÍSTICAS

- El monitor dispone de múltiples funciones que permiten monitorizar pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
- El equipo admite una alimentación de 100 V-240 V 50 Hz/60 Hz.
- Los usuarios pueden seleccionar diferentes configuraciones de parámetros según los requisitos.
- Muestra datos en tiempo real y formas de onda mediante una pantalla LCD TFT en color de 5".
- Se puede conectar al Sistema de Monitoreo Central a través de una red inalámbrica para formar un sistema de monitoreo de red.
- Puede monitorear parámetros tales como ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP y CO2 (opcional).
- Integra un módulo de medición de parámetros y una pantalla en un solo dispositivo para formar un monitor compacto y portátil.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 168 mm (largo) × 56 mm (ancho) × 98 mm (alto)
- Peso: <1,0 Kg (sin accesorios)



## FUNCIONES:

- LCD TFT a color de 5", interfaz multilingüe (chino simplificado, inglés, ruso, kazajo, eslovaco, checo, español, etc.).
- Diseño sin ventilador, silencioso, que ahorra energía y es limpio, lo que reduce la posibilidad de infección cruzada
- Con interfaz estándar, OxyCRG, interfaz de caracteres grandes e interfaz completa, conveniente de observar.
- La forma de onda, el color del parámetro y la ubicación se pueden configurar opcionalmente.
- Todas las operaciones se pueden completar con los botones y la pantalla táctil.
- Utiliza tecnología digital de SpO2, antimovimiento antiinterferencias de la luz ambiental, y la medición puede realizarse en circunstancias de baja perfusión.
- Modo de medición NIBP: Manual / AUTO / STAT, almacenamiento para datos NIBP de 2400 grupos.
- Permite conectarse al sistema de monitoreo central mediante WiFi.
- Batería incorporada de gran capacidad, cumple con los requisitos de funcionamiento a largo plazo. AC/DC, logra un monitoreo ininterrumpido.
- Unidad quirúrgica anti-alta frecuencia, a prueba de desfibrilación (son opcionales cables especiales).

## ACCESORIOS:

- Sonda de SpO2 en la punta del dedo para adultos
- Brazal NIBP para adultos
- Tubo de extensión NIBP
- Cable conductor de ECG
- Electrodo de ECG
- Sonda de temperatura
- Cable de alimentación
- Manual de usuario



### Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62  
CDMX  
55 3093 9090

### Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335  
33 3617 0465

### Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

### Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997  
222 211 4462

### Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)



@byHergom



5624482452