


uMED 20 VET

Desfibrilador Veterinario / Monitor
Salvar vidas a través de la simplicidad



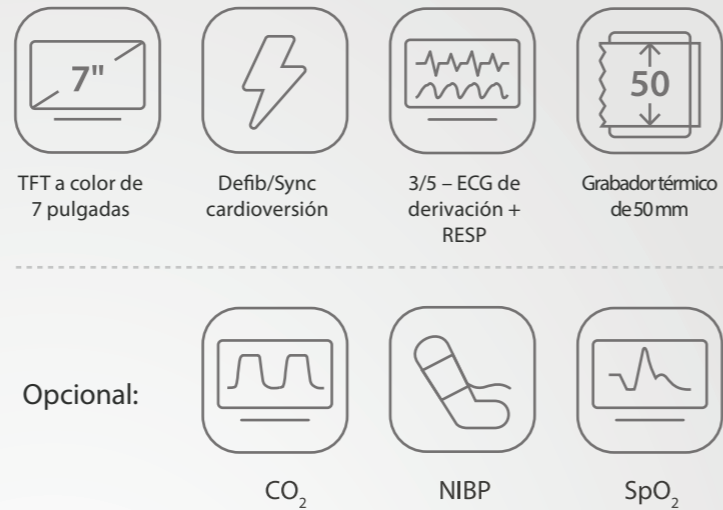

Desfibrilación rápida

Equipado con tecnología QShock, uMED 20VET proporciona una experiencia de desfibrilador ultra rápida. Solo toma <7.5s desde el encendido, la carga y despliegue de ECG. Ayudando a aumentar la posibilidad de una desfibrilación exitosa.



Panel intuitivo

- Desfibrilación manual con pasos claros 1-2-3
- Botones codificados por colores para una fácil identificación



Diseño de un solo operador

- Las paletas externas vienen con botones para la selección de energía, carga y choque
- Las paletas externas integradas son aplicables pacientes de gran tamaño y tamaño pequeño





Mayor eficiencia

Tecnología avanzada

Desfibrilación bifásica: tecnología mejorada con menor riesgo de quemaduras en la piel o lesiones miocárdicas.

Compensación de impedancia: autoajuste de ciclos de corriente pico y descarga de acuerdo con el cambio de impedancia.

Indicador de contacto con el paciente: Los indicadores de colores para la condición de contacto con el paciente son visibles tanto en la pantalla principal como en las paletas externas, lo que ayuda a optimizar la posición de contacto o elegir la mejor configuración de potencia para la mejor recuperación.

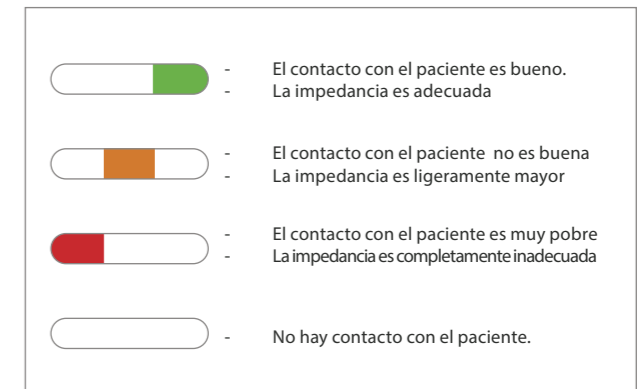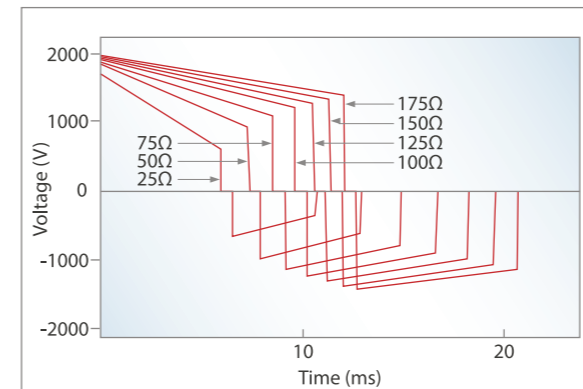

Siempre preparado

Prueba automática completa

Prueba Power-off:

- El desfibrilador realiza pruebas diarias y semanales mientras se encuentra apagado, incluida la prueba de suministro de energía.

Prueba de encendido:

- Se realiza una prueba completa cada vez que se enciende el dispositivo, el indicador de servicio se ilumina una vez que falla la prueba automática.



Indicador de Estado

Batería Durable

- Calibración automática de la capacidad de la batería, libre de mantenimiento
- La batería de gran capacidad admite un mayor tiempo de operación y vida útil
- Dedicado para aplicaciones de desfibrilación



>300 shocks@ 200J