


Vetus 30

Sistema de ultrasonido diagnóstico veterinario


¡Nuevo modelo!



Galería de imágenes

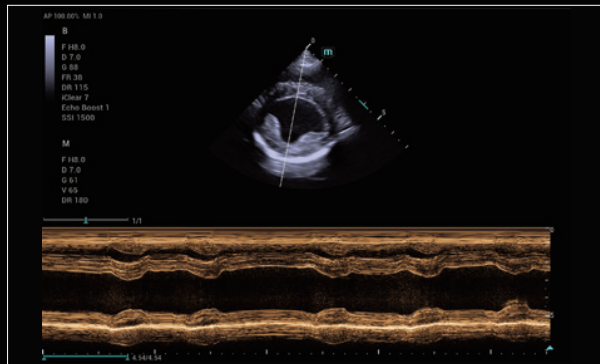

Corazón canino (modo M)

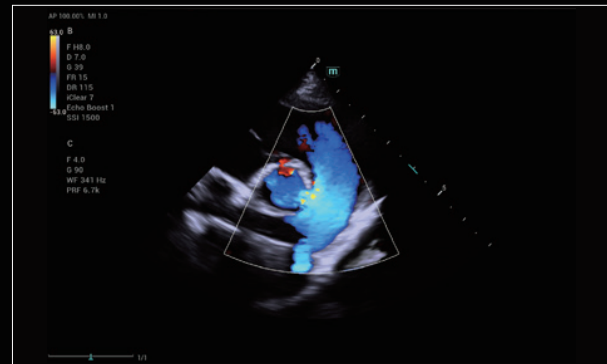


Arteria pulmonar canina




Glándula suprarrenal canina




Riñón canino (Doppler de poder)

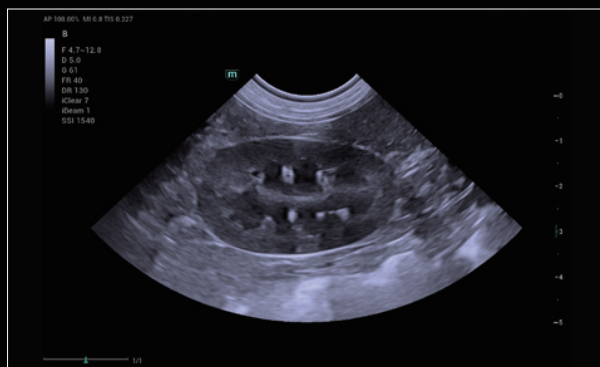


Riñón canino

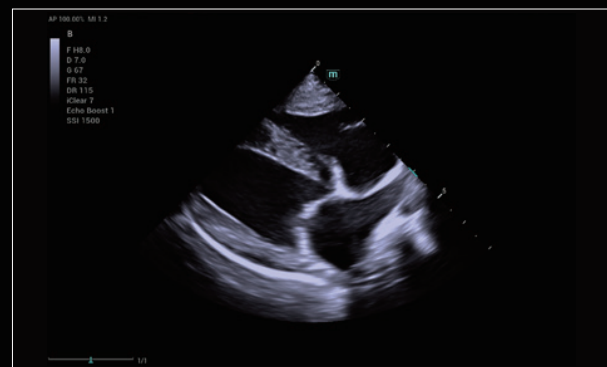

Vista paraesternal derecha de cuatro cámaras, canino

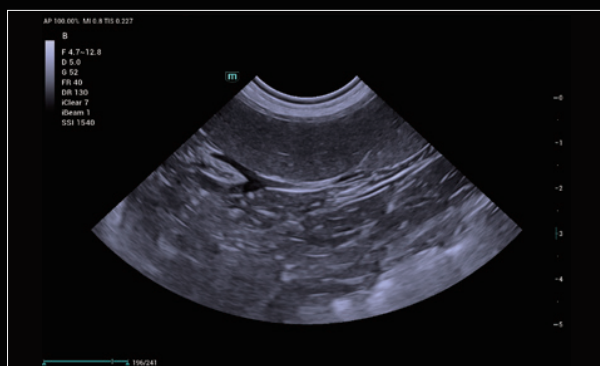

Bazo felino

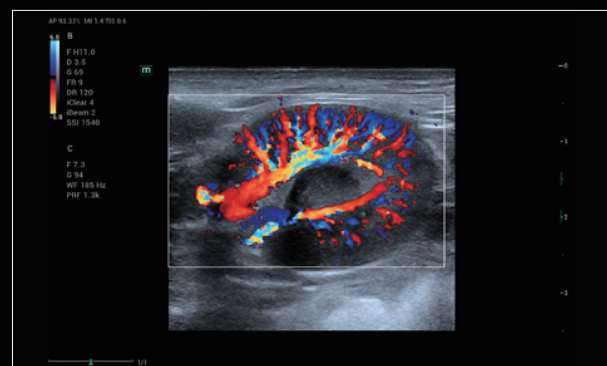

Riñón felino (HR Flow)



Vetus 30



Diseñado para la práctica veterinaria y sus necesidades clínicas, Vetus 30 integra el flujo de trabajo inteligente WiSE. Su diseño accesible y sus completas herramientas clínicas permiten un manejo intuitivo y sencillo. Combina procesamiento avanzado de imagen con la nueva tecnología de supresión adaptativa de interferencias (AIS) para ofrecer imágenes fieles, nítidas y detalladas, que aportan mayor confianza al diagnóstico clínico.

Flujo de trabajo inteligente WiSE

WiSE agiliza el proceso, desde el ajuste del equipo hasta el informe, y mejora la experiencia de uso y la eficiencia del estudio, para un diagnóstico más sencillo y confiable.





Diseño funcional

Conexión rápida y segura

- Los puertos elevados evitan que los cables del transductor arrastren por el piso.
- Diseño compacto, práctico y resistente a conexiones y desconexiones frecuentes.



Ajuste flexible

- Altura mínima: 0.76 m, ideal para perros grandes
- Ancho total: 0.51 m, fácil manejo en espacios reducidos




Serie i

Vetus 30 integra herramientas i-Tools que mejoran la eficiencia veterinaria y estandarizan el estudio.



► iScanHelper

Tutoriales con más de 100 planos estándar: abdomen, corazón, partes pequeñas y aparato reproductor.

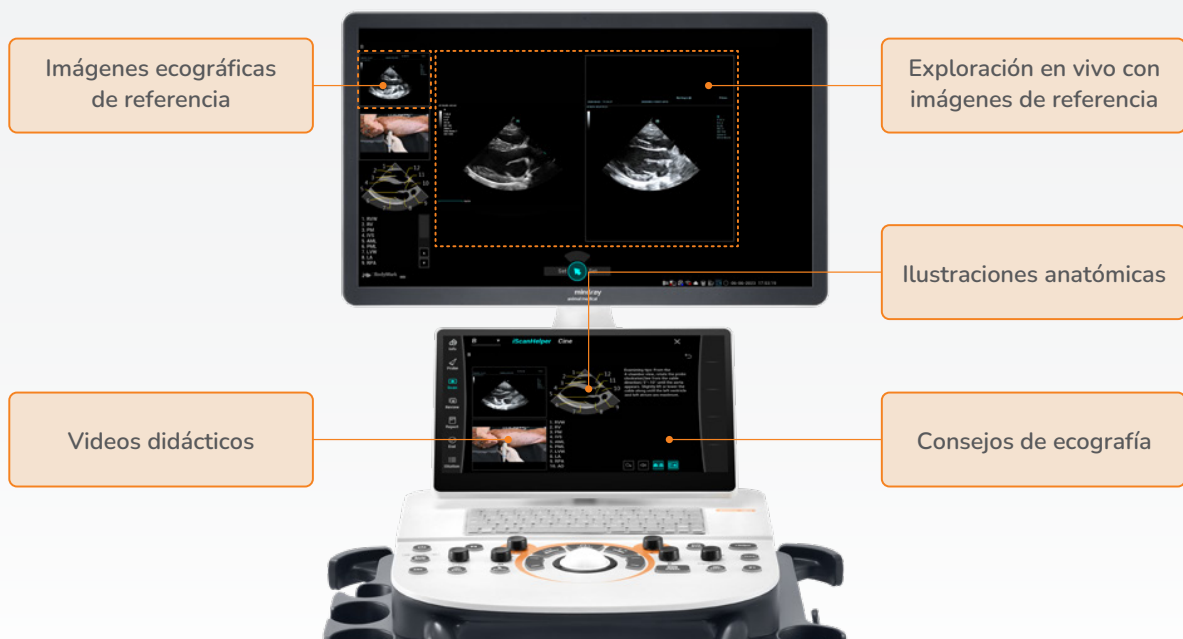




Herramientas inteligentes


► Smart Calc

Delimita lesiones con un toque y calcula distancia, área, perímetro, intensidad media de gris y otras medidas automáticamente.

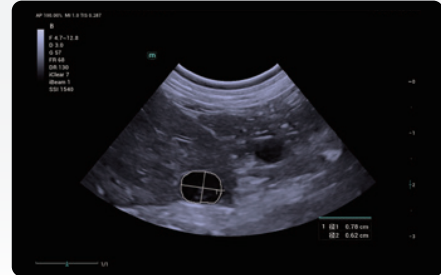

► Smart Track


Seguimiento vascular y optimización en tiempo real en Doppler color y pulsado, para facilitar el manejo.

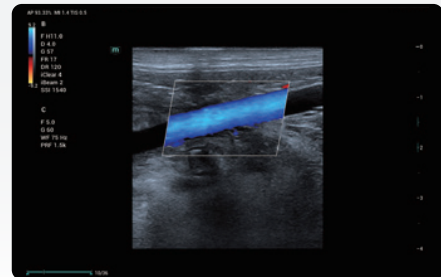

Compartir fácilmente



Gallery Drop

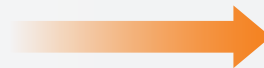


Envío por correo



Calidad de imagen superior


Tecnología AIS: supresión adaptativa de interferencias

Las interferencias electromagnéticas en la clínica veterinaria degradan la imagen ecográfica. AIS combina hardware de precisión y algoritmos innovadores para reducir notablemente estas interferencias y ofrecer imágenes más limpias y fieles.

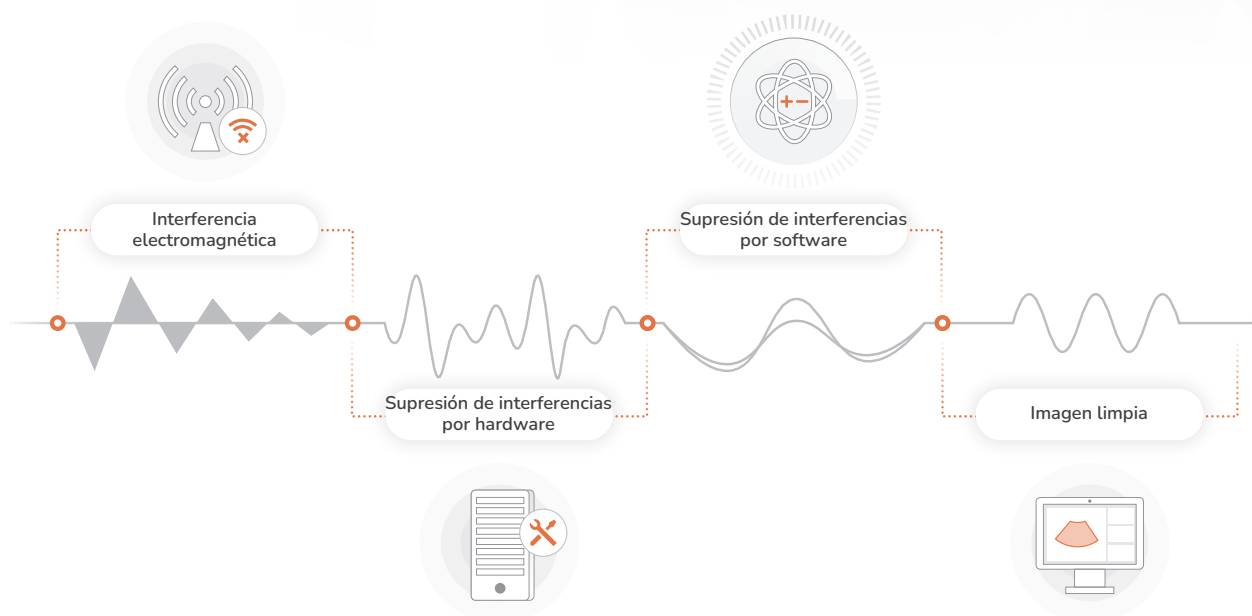

Preajustes por especie

- 🐾 5 categorías de aplicación
- 🐾 7 tipos de animales
- 🐾 Cambio rápido con un toque
- 🐾 Preajustes diagnósticos personalizables

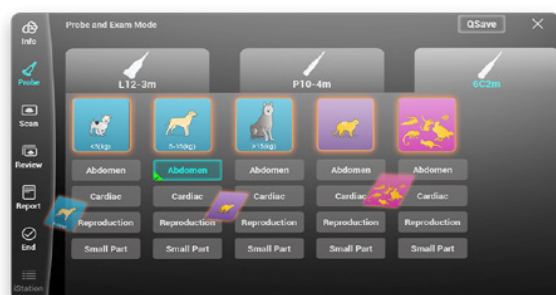

Transducer sheet

Probe	Illustration	Type of Array	Parameters	Application	Biopsy kit
6C2m		Curved	- Bandwidth: 2.6 – 12.8MHz - FOV (max): 95° - Convex Radius: 15mm	Abdomen (Canine, Feline), Cardiology (Canine, Feline), Reproduction (Canine, Feline), Small Parts (Canine, Feline)	NGB-005, multiangle, reusable
C5-2m		Curved	- Bandwidth: 1.2 – 6.0MHz - FOV (max): 73° - Convex Radius: 50mm	Abdomen (Canine, Equine, Bovine, Ovine), Reproduction (Canine, Equine, Bovine, Ovine), MSK (Canine, Equine, Bovine, Ovine)	NGB-055, multiangle, reusable
L12-3m		Linear	- Bandwidth: 3.0 – 13.0MHz - FOV (max): Non-extended: 3.80cm; Extended: 100°	Abdomen (Canine, Feline), Small Parts (Canine, Feline), MSK (Canine, Feline, Equine)	NGB-007, multiangle, reusable
P8-2m		Phased	- Bandwidth: 2.3 – 8.0MHz - FOV (max): 90°	Cardiology (Canine, Feline), Abdomen (Canine, Feline)	Not available
P10-4m		Phased	- Bandwidth: 3.0 – 11.4MHz - FOV (max): 90°	Cardiology (Canine, Feline), Abdomen (Canine, Feline)	Not available

