



BF 1000  
Super Precision


beurer  
wellbeing

## BF 1000 Súper Precisión


german  
engineering



• Análisis preciso de todo el cuerpo con 8 electrodos.

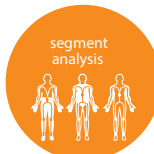

• Visualización segmentada de la grasa corporal y porcentaje muscular (brazos, piernas, tronco).

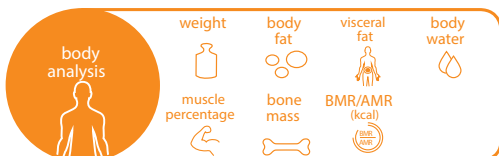

Medición cruzada con 8 electrodos para el monitoreo preciso de áreas diferentes del cuerpo (brazos, piernas, tronco).

Determinación del peso corporal, grasa corporal, agua corporal, porcentaje de músculo, masa ósea, BMR/AMR (Kcal).

Determinación de la grasa visceral (grasa orgánica/grasa abdominal).

Rotación básica y activa en Kcal.

Pantalla de matriz de puntos en relieve sobre un soporte de aluminio con retroiluminación azul para una lectura óptima.

Visualización de hora y fecha.

Guía de usuario intuitiva en 5 idiomas (D/GB/F/ES/I).

Con software/ aplicación "beurer HealthManager" para descargar gratis.

Con electrodos de acero inoxidable (de mano).

ITO\*\* superficie de pesaje recubierta con vidrio grueso de seguridad de 10 mm de espesor.

Cambiar a kg/lb/st

Capacidad: 200 kg

Graduación:

- 0.1% para grasa corporal, agua corporal e índice muscular.

- 50 g para peso corporal y masa de hueso.

5 niveles de actividad.

10 memorias de usuario con 30 espacios de medición para cada uno + modo invitado

Indicación de sobrecarga.

Botón de encendido e inicio rápido de tecnología.

Apagado automático.

Incluye baterías AA 4 x 1.5 V

Medidas del producto (LxAxA): 38 x 39 x 100 cm.

Peso del producto: 6,35 kg aproximadamente.

5 años de garantía.

Unidad de venta: 1/ envío en caja de cartón

EAN No.: 4211125748609

Artículo no.: 748.60

\* Umschließt die inneren Organe in der Bauchhöhle. Kann in Zusammenhang mit Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes stehen.


\*\* Indium Tin Oxide / Indium Zinn Oxid

748.60\_BF1000\_2018-09-03\_02\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten



BF 1000  
Super Precision

beurer  
wellbeing

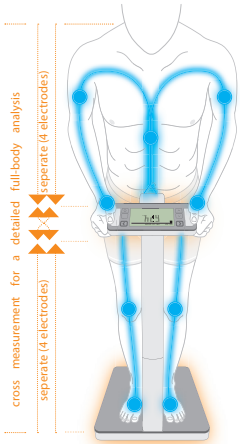

**Pesaje para profesionales:**

8 electrodos y medidas cruzadas para precisar el monitoreo de áreas específicas del cuerpo.

**Súper Precisión, ¿por qué más preciso?**

B.I.A usando 8 electrodos (manos y pies).


Gracias a las mediciones cruzadas no solo el cuerpo inferior y superior son medidas por separado, sino también el tronco, piernas y brazos son mostradas.

**Nuevo: Grasa visceral**

Nuevo: mediciones de grasa visceral, la cual rodea el interior de los órganos en el área abdominal (= grasa orgánica/grasa abdominal) Esta puede conducir a enfermedades como la hipertensión y diabetes.



Conexión

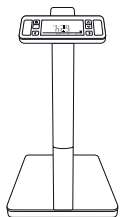

Innovadora conexión entre Smartphone y la báscula- hace un seguimiento de sus mediciones y datos del cuerpo en casa y en movimiento.

Fácilmente sincroniza con su Smartphone via Bluetooth®



Synchronisierung mit  
• iOS ≥ 9.0  
• Android™ ≥ 5.0  
• Bluetooth® ≥ 4.0



Liste der unterstützten Geräte

748.60\_BF1000\_2018-09-03\_02\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

\*geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud  
Nur mit der „beurer HealthManager“ App in vollem Umfang verwendbar.